

## Стартовые (комбинированные) наборы

Включают в себя все необходимое для выполнения реставраций: 18 штифтов (3 типоразмера, по 6 шт. каждого) и соответствующий набор разверток (и фрез, для модели E). Упаковка - пластиковый бокс.



## Дополнительные наборы

Содержат 6 штифтов одного типоразмера. Рекомендуется в покупке, если у Вас уже имеется комплект инструментов (например, из ранее приобретенного стартового набора). Упаковка - полиэтиленовый пакет.



## Как сделать заказ?

Выберите необходимый Вам типоразмер штифта и упаковку, после чего назовите каталожный номер набора согласно приведенной таблице.

Типоразмер штифта	Каталожный номер для заказа	
	Пакет , 6 шт.	Стартовый набор бокс, 3x6 шт. + инструмент
A01	IKS-A01-V	IKS-Z10-F
A02	IKS-A02-V	
A03	IKS-A03-V	
A04	IKS-A04-V	
B01	IKS-B01-V	IKS-Z20-F
B02	IKS-B02-V	
B03	IKS-B03-V	
E01	IKS-E01-V	IKS-Z30-F
E02	IKS-E02-V	
E03	IKS-E03-V	

# IKADENT



*Желаем здоровья Вам  
и Вашим пациентам!*

## СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ ШТИФТЫ

**Компания «IKADENT» рада представить Вашему вниманию новый высококачественный продукт - стекловолоконные штифты.**

Изделия разработаны и производятся в соответствии с последними тенденциями стоматологической индустрии и традиционными стандартами качества «IKADENT». Штифты сочетают проверенные временем конструктивные особенности титановых штифтов и преимущества нового материала - стекловолокна. Мы предлагаем не только штифты распространенных цилиндрических и цилиндро-конических форм, но и уникальные модели анкерных стекловолоконных штифтов, имеющих, подобно титановым штифтам «IKADENT», развитую коронковую часть и плечо, что позволяет выполнять объемные эстетические реставрации прямым методом.



Использование штифтов «IKADENT» снижает временные затраты врача и пациента, во многих случаях позволяя осуществить лечение за одно посещение. Штифты «IKADENT» значительно привлекательнее по цене, по сравнению с сопоставимыми по качеству зарубежными аналогами, что позволяет снизить стоимость реставрации для пациента. Модельный ряд позволяет подобрать нужный размер и форму штифта практически для любого клинического случая.

Использование штифтов «IKADENT» снижает временные затраты врача и пациента, во многих случаях позволяя осуществить лечение за одно посещение. Штифты «IKADENT» значительно привлекательнее по цене, по сравнению с сопоставимыми по качеству зарубежными аналогами, что позволяет снизить стоимость реставрации для пациента. Модельный ряд позволяет подобрать нужный размер и форму штифта практически для любого клинического случая.

**Особенности штифтов «IKADENT»:**


- ✓ Материал штифтов светопрозрачен, а цветовой тон близок к эмали и натуральному дентину. Поэтому штифты удобно использовать для эстетической реставрации, не прибегая к дополнительным мерам по маскировке.
- ✓ Штифты обладают высокой прочностью, не уступающей титану (1000 МПа).
- ✓ Модуль упругости штифтов (35 GPa) сопоставим с натуральным дентином (18 GPa). Поэтому штифты образуют гомогенную структуру с твердыми тканями и композитным цементом, а жевательные нагрузки равномерно распределяются по всему корню, повышая долговечность реставрации.
- ✓ Штифты пассивные, при установке и использовании не травмируют дентин и не создают статических напряжений в корне.
- ✓ Поверхность штифтов не подвергается дополнительной химической обработке на производстве и не требует специальных «фирменных» материалов. Поэтому для установки штифтов Вы можете использовать любую привычную Вам адгезивную методику и композитные цементы.
- ✓ Штифты полностью совместимы с имеющимися в продаже инструментами «IKADENT» и других производителей (Maillefer, MANI).
- ✓ Материал штифтов легко обрабатывается. Поэтому Вы можете при помощи алмазного инструмента скорректировать форму и длину штифта в зависи-

мости от клинического случая. Кроме того, в экстренном случае штифт легко удалить из канала при помощи алмазного бора или стального дреля.


**Эндоканальные штифты  
Модели А и В**

Эндоканальные штифты «IKADENT» применяются в качестве армирующего (усиливающего) элемента для эстетической реставрации частично разрушенной коронки зуба при эндодонтическом лечении. Эти штифты используются во всех группах зубов при сохранении минимум двух стенок естественной коронки. В силу отсутствия плеча (опорного элемента) штифты не предназначены для композитных реставраций при значительном повреждении или полной утрате естественной коронки, а также крепления на них металлокерамических коронок, мостов и прочих объемных конструкций.


**Модель А. Цилиндрическая форма**

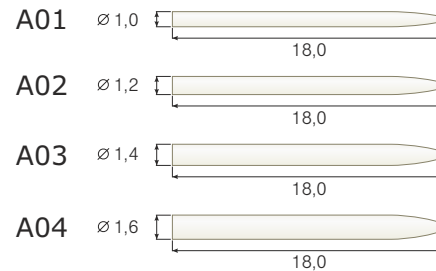

**Модель В. Цилиндро-коническая форма**

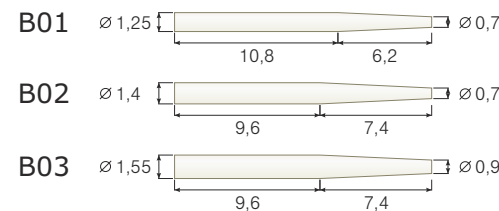


**Примеры использования:**

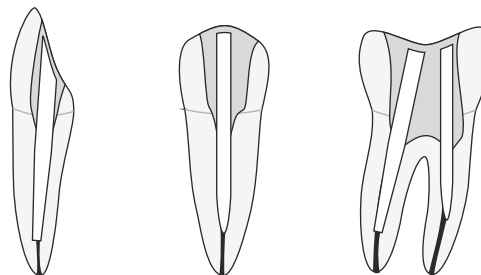


**Анкерные штифты  
Модель Е**

Анкерные штифты «IKADENT» используются для эстетической реставрации коронки зуба при ее значительном разрушении или полной утрате. Массивная коронковая часть облегчает создание культи, минимизируя массу композита, и обеспечивает максимальную площадь поверхности для надежной адгезии с реставрационным материалом. Наличие плеча (опорного элемента) позволяет применять штифты в качестве основы для объемных и высоконагруженных реставраций.

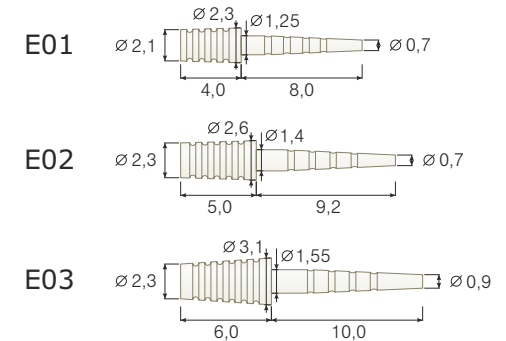


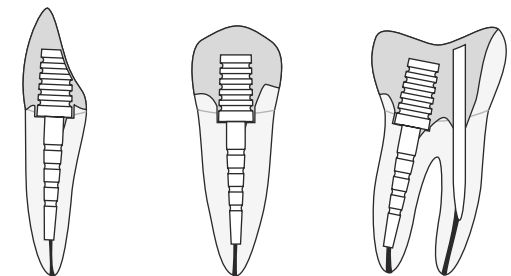

**Примеры использования:**



Штифты поставляются как отдельно (в блистерной упаковке), так и в составе наборов, содержащих инструменты для их установки. Рабочие размеры инструментов подобраны под установочные размеры штифтов, входящих в набор.

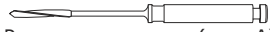**Инструменты, входящие в набор, и их назначение:**

 Развертка цилиндр (мод. А)	Расширение канала под размеры хвостовика штифта
 Развертка конус (мод. В, Е)	
 Торцевая фреза (мод. Е)	Создание плоского основания под плечо штифта